

Ultra-Tiefkühlschränke



Serie UF V



Ultratiefkühl- schränke

Serie UF V

Seite 6

Optionen und Zubehör


Seite 9

Umweltfreundlichkeit wird beim neuen BINDER Ultratiefkühlschrank groß geschrieben. Hierzu zählen insbesondere die beste Energieeffizienz seiner Klasse und der Verzicht auf klimaschädliche Kältemittel. Ein mehrstufiges Sicherheitskonzept lässt sich individuell zusammenstellen und damit jeder Aufstellunggebung anpassen. Mit den praxisgerechten Gerätegrößen und durchdachten Optionen sowie praktischem Zubehör ist alles verfügbar, was für die zuverlässige Langzeitlagerung von wertvollen und sensiblen Proben sinnvoll ist.

PRODUKTAUSWAHL ULTRATIEFKÜHLCHRÄNKE

Merkmale	Serie UF V › Seite 6
Modell	
Modell 500	•
Modell 700	•
Allgemeine Daten	
Temperaturbereich [°C]	-90...-40
Kühltechnologie	Kaskaden-Kompressionskältemaschine
Kältemittel	R-290 / R-170
<ul style="list-style-type: none"> • Standardausstattung 	

VORTEILE AUF EINEN BLICK

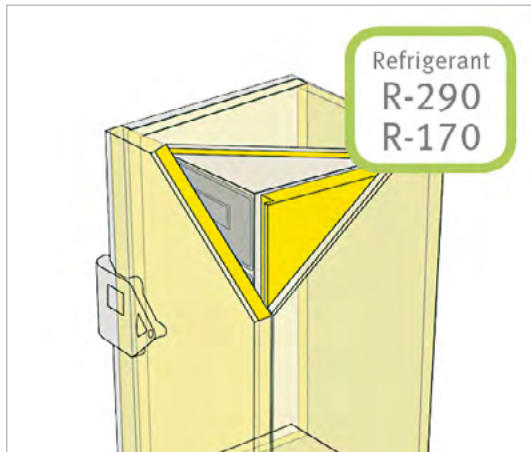

VORBILDICHE UMWELTFREUNDLICHKEIT

Serie UF V

Einsatz modernster Kühltechnologie mit klimaneutralen Kältemitteln und niedrigstem Energieverbrauch dank großflächiger Vakuum-Wärmedämmung.



KOMFORTABLE TÜRBEDIENUNG

Serie UF V

Die Türöffnung kann wahlweise manuell über einen ergonomischen Türverschlusshebel oder optional per Knopfdruck über einen elektromechanischen Türverschluss erfolgen. Die elektronische Zugangskontrolle kann über NumPad erfolgen (Option).



MINIMALE EISBILDUNG

Serie UF V

Neuartiges Türdichtungs-Konzept vermindert die Neigung zur Eisbildung am Türrahmen und vereinfacht gleichzeitig die Entfernung von Eis.



LANGLEBIGE QUALITÄT

Serie UF V

Innenkessel, Einlegböden und Innentüren sind komplett aus rostfreiem Edelstahl.

Serie UF V | mit klimaneutralen Kältemitteln

Der BINDER Ultratiefkühlschrank sorgt für die sichere Lagerung von Proben bei -80 °C. Er vereint herausragende Umweltfreundlichkeit mit niedrigem Energieverbrauch, komfortabler Bedienung und einem individuellen Sicherheitskonzept.



Modell UFV 500

WICHTIGE MERKMALE

- Temperatur-Regelbereich: -90 °C bis -40 °C
- Niedrigster Energieverbrauch seiner Klasse
- Leistungsstarke Kaskaden-Kompressionskältemaschine
- Umweltfreundliche Kältemittel R-290 und R-170
- Effiziente Wärmedämmung durch Vakuumdämmplatten
- Neuartiges Türdichtungs-Konzept vermindert Eisbildung
- Ergonomischer Türverschlusshebel
- Rostfreier Innenraum komplett aus Edelstahl
- Aushängbare Innentüren aus Edelstahl
- 3 flexibel positionierbare Einlegeböden aus Edelstahl

VERFÜGBARE GRÖSSEN

Modell	Innenraum- volumen [L]	Online-Datenblätter
UFV 500	477	> go2binder.com/de-UFV500
UFV 700	700	> go2binder.com/de-UFV700



WISSENSWERTES

Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, die Sie in unseren Fachbeiträgen finden:

- Wissenswertes: > go2binder.com/de-wissenswertes
 Case Studies: > go2binder.com/de-case-studies

TECHNISCHE DATEN

Beschreibung	UF V 500	UF V 700
Gehäuseabmessungen ohne Anbauten und Anschlüsse		
Breite netto [mm]	826	1110
Höhe netto [mm]	1966	1966
Tiefe netto [mm]	938	938
Innenabmessungen		
Breite [mm]	606	890
Höhe [mm]	1300	1300
Tiefe [mm]	605	605
Maße		
Innenraumvolumen [L]	477	700
Gerätegewicht netto (leer) [kg]	247	288
Maximale Gesamtbelastung [kg]	200	200
Leistungsdaten Temperatur		
Temperaturbereich [°C]	-90...-40	-90...-40
Räumliche Temperaturabweichung bei -80 °C [± K]	2,5	2,5
Zeitliche Temperaturabweichung bei -80 °C [± K]	1,5	1,5
Aufwärmzeit bei Stromausfall von -80 °C bis -60 °C [min]	230	250
Elektrische Daten		
Nennleistung (Variante 120 V) [kW]	1,6	1,6
Nennleistung (Variante 230 V) [kW]	1,6	1,6
Nennleistung (Variante 240 V) [kW]	1,6	1,6
Umweltrelevante Daten		
Energieverbrauch bei Sollwert -80 °C und Tu = 21 °C [kWh/d]	7,9	8,1
Einbauten		
Anzahl Einschübe (Std./max.)	3/13	3/13

BESTELLINFORMATIONEN [Art. Nr.]


Weitere Details: Gehen Sie auf www.binder-world.com > Suche > geben Sie die Artikelnummer ein.

Nennspannung	Ausführung	UF V 500	UF V 700
240 V 1~ 60 Hz	Standard	9020-0353	9020-0354
230 V 1~ 50 Hz	Standard	9020-0347	9020-0348
	Wasserkühlung	9020-0349	9020-0350
120 V 1~ 60 Hz	Standard	9020-0351	9020-0352


► Eine Auswahl an Optionen, Zubehör und Dienstleistungen zum jeweils passenden Gerät finden Sie auf Seite 9

ABMESSUNGEN inkl. Anbauten und Anschlüssen [mm]

UFV 500

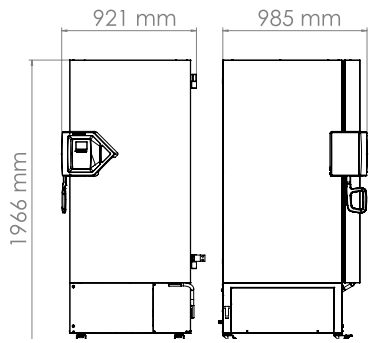

UFV 700

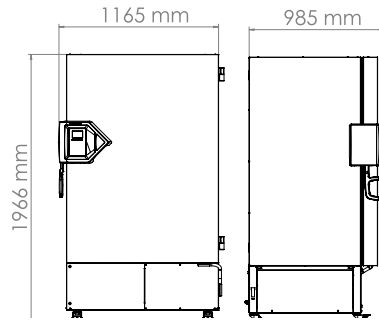

AUSZUG AUS OPTIONEN UND ZUBEHÖR

Ausgeschäumte Kompartimenttüren mit Dichtung

Besonders geeignet für häufiges Türöffnen.
Serie UF V

Tür-Zugangssystem

Bestehend aus elektromechanischem Türverschluss und elektronischer Zugangskontrolle via NumPad.
Serie UF V

Alarmsystem

Batteriegepuffertes System zur Aufrechterhaltung von Temperaturanzeige, optischen und akustischen Alarmmeldungen und Datenkommunikation.
Serie UF V

Schrankgestelle

Große Auswahl an Gestellen aus Aluminium oder Edelstahl sowie Kryoboxen.
Serie UF V

Dienstleistungen

Installationservice, Wartung, Kalibrierung, Validierung oder Gewährleistungsservice können Sie im Rahmen eines Wartungsvertrags oder in einzelnen Positionen abrufen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Zubehör und Dienstleistungen.
Serie UF V

BINDER INDIVIDUAL

Auf der Basis eines BINDER Serienproduktes entwickeln und realisieren wir individuelle Lösungen, als Einzelgerät oder in Kleinserien. Alle Produkte sind geprüft und zertifiziert und werden mit voller Funktionsgarantie und Gewährleistung ausgeliefert. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Zubehör und Dienstleistungen.
Serie UF V


► Alle Extras online go2binder.com/de-Optionen



Ausgeschäumte Kompartimenttüren mit Dichtung



Tür-Zugangssystem

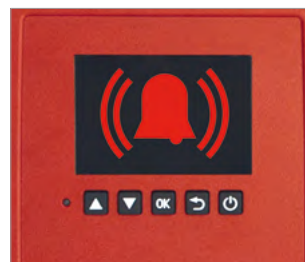

Alarmsystem



Auswahl an Gestellen und Boxen

BINDER Produktprogramm

CO₂-Inkubatoren

Inkubatoren

Kühlinkubatoren

Wachstumsschränke

Ultratiefkühlschränke

Trocken- und Wärmeschränke

Sicherheitstrockenschränke

Vakuumtrockenschränke

Konstantklimaschränke

Wechselklimaschränke



Keine Produktneuheit verpassen -
Bleiben Sie auf dem Laufenden mit
unserem BINDER Newsletter

[Jetzt anmelden](#)

go2binder.com/de-newsletter-anmeldung



Best conditions for your success

BINDER GmbH

Tuttlingen, Germany

Tel +49 7462 2005 0
Fax +49 7462 2005 100
info@binder-world.com
www.binder-world.com

BINDER Asia Pacific (Hong Kong) Ltd.

Kowloon, Hong Kong, P.R. China

Tel +852 39070500
Fax +852 39070507
asia@binder-world.com
www.binder-world.com

Representative Office for CIS

Moscow, Russia

Tel +7 495 988 15 16
Fax +7 495 988 15 17
russia@binder-world.com
www.binder-world.ru

BINDER Environmental Testing Equipment (Shanghai) Co., Ltd.

Shanghai, P.R.China

Tel +86 21 685 808 25
Fax +86 21 685 808 29
china@binder-world.com
www.binder-world.com

BINDER Inc.

Bohemia, NY, USA

Tel +1 631 224 4340
Fax +1 631 224 4354
usa@binder-world.com
www.binder-world.us